

ALBLOアプリの インストールについて

※本マニュアルはAndroid7.0.0の端末を例として記載しております。
ALBLOを例として記載していますが、ALBLOIDも特記箇所以外は同様です。

目次

準備

設定内容をメモする～ALBLOアプリをアンインストールする

- 準備1. ALBLOアプリを起動する。 [p.3](#)
- 準備2. 設定画面を表示させる。 [p.4](#)
- 準備3. 送信先の設定をメモする。 [p.6](#)
- 準備4. アラート送信先の設定をメモする。 [p.8](#)
- 準備5. 電子メール設定をメモする。 [p.10](#)
- 準備6. 乗務員情報をメモする。 [p.12](#)
- 準備7. ALBLOをアンインストールする。 [p.14](#)

インストール方法

- 1. TANITAホームページからapkをダウンロードする。 [p.15](#)
- 2. ダウンロードしたapkを通知から選択する。 [p.17](#)
- 3. apkをインストールする。 [p.19](#)
- 4. アプリが旧バージョンか確認する。 [p.20](#)
- 5. メモ内容を再入力して確認する。 [p.21](#)

こんなときは

- 1. ダウンロード通知が表示されない [p.22](#)
- 2. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる
 - 2-1. **Android7.X.X以前のOS**をお使いの方 [p.24](#)
 - 2-2. **Android8.X.X以降のOS**をお使いの方 [p.28](#)
- 3. 自動でアプリのアップデートがされてしまう [p.32](#)
- 4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する [p.37](#)

準備 1. ALBLOアプリを起動する。



準備 2. 設定画面を表示させる。



右上の設定アイコンを押して設定画面へ遷移させる

この時、イヤホンジャックにイヤホンが刺さっている場合は、抜いてから次の動作をしてください


ALBLOIDの場合はいったん乗務員IDを入力してください

右上に歯車の設定アイコンが表示されない場合は次のページをご覧ください

準備 2. 設定画面を表示させる。



準備3. 送信先の設定をメモする。

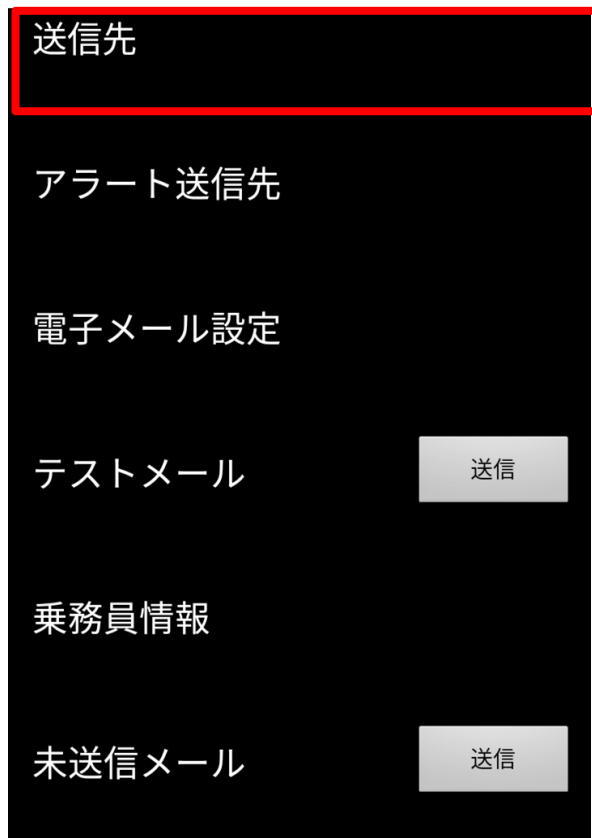

ALBLOアプリの設定画面から
送信先をタッチします。

準備3. 送信先の設定をメモする。

管理PCメールアドレス(To)

hogehoge@tanita.co.jp

その他メールアドレス(Cc1)

その他メールアドレス(Cc2)


その他メールアドレス(Cc3)

赤枠で囲まれたアプリの設定項目は旧アプリをインストールすると消えてしまいます

その為、必要に応じてメモを残しておいてください

メモを取ったら戻るボタンで設定画面に戻ってください

準備4. アラート送信先の設定をメモする。

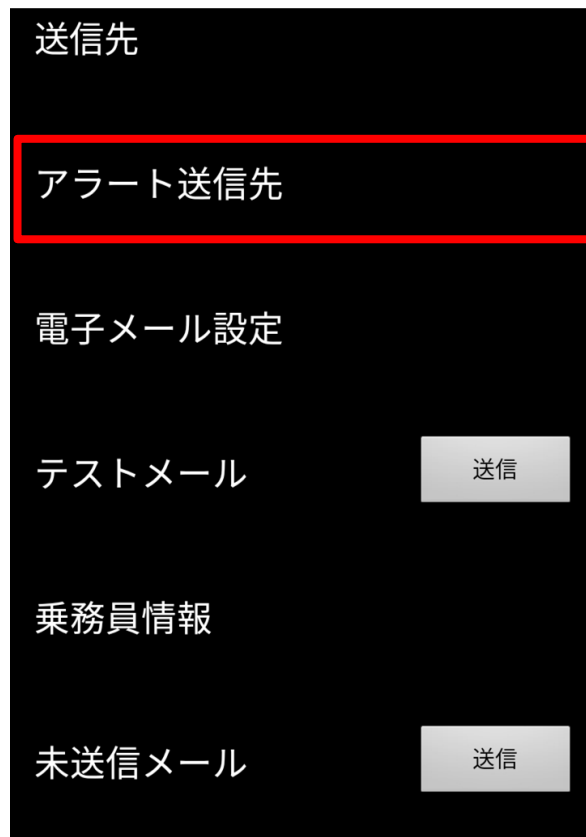

ALBLOアプリの設定画面から
アラート送信先をタッチします。

準備4. アラート送信先の設定をメモする。

アラートメールアドレス(To)

nogehoge@tanita.co.jp

アラートメールアドレス(Cc1)

nogehoge.admin@tanita.co.jp


アラートメールアドレス(Cc2)

赤枠で囲まれたアプリの設定項目は
旧アプリをインストールすると消え
てしまいます

その為、必要に応じてメモを残して
おいてください

メモを取ったら戻るボタンで
設定画面に戻ってください

準備 5. 電子メール設定をメモする。

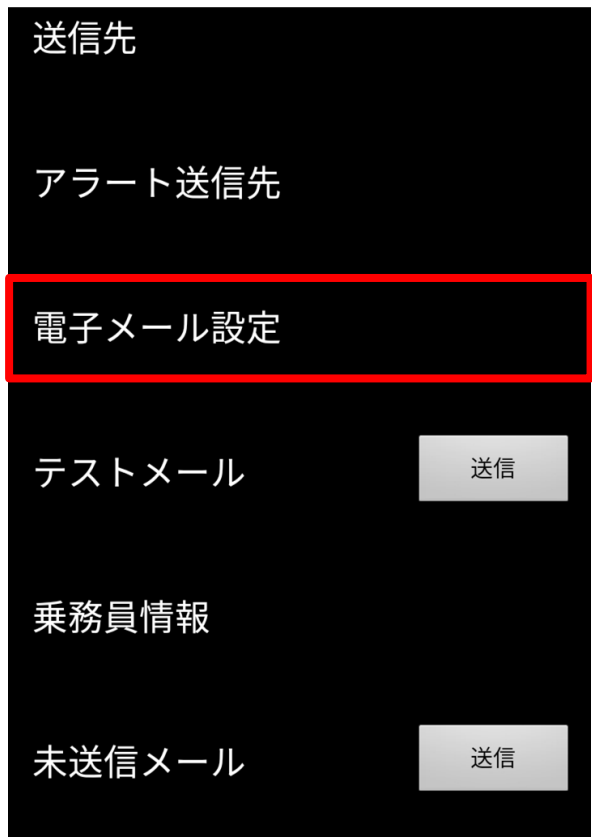

ALBLOアプリの設定画面から
電子メール設定をタッチします。

準備 5. 電子メール設定をメモする。

電子メールアドレス hogehoge@tanita.co.jp
送信メールサーバ(SMTP) smtp.gmail.com
ポート 465
アカウント名 hogehoge@tanita.co.jp
パスワード *****
SSL <input checked="" type="checkbox"/> SSLを使用する


赤枠で囲まれたアプリの設定項目は旧アプリをインストールすると消えてしまいます

その為、必要に応じてメモを残しておいてください

パスワードは
タッチして文字を再表示させて
メモしてください

メモを取ったら戻るボタンで設定画面に戻ってください

準備6. 乗務員情報をメモする。

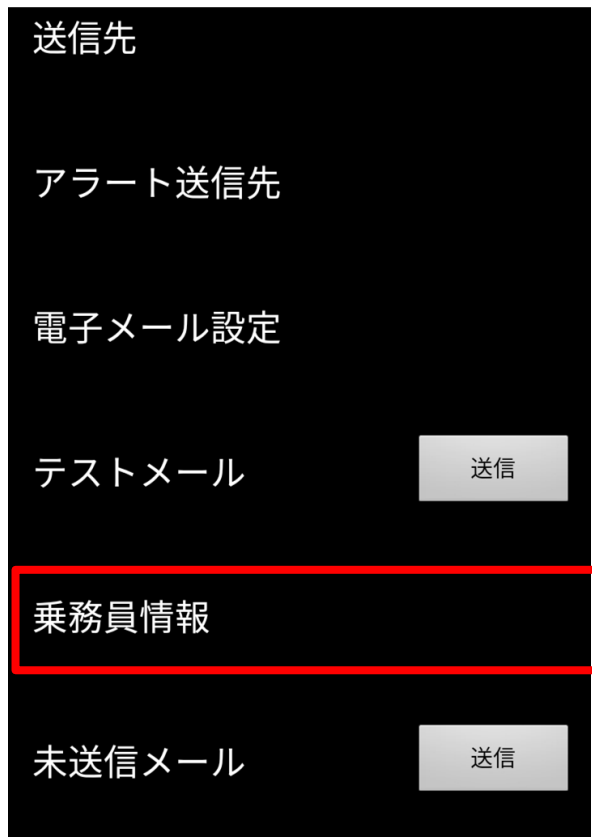

この手順はALBLOIDでは不要です。

ALBLOアプリの設定画面から乗務員情報をタッチします。

準備 6. 乗務員情報をメモする。

車番 1234
所属 株式会社タニタ
乗務員ID 00001
乗務員名 谷田太郎
メモ


この手順はALBLOIDでは不要です。

赤枠で囲まれたアプリの設定項目は旧アプリをインストールすると消えてしまいます

その為、必要に応じてメモを残しておいてください

メモを取ったらホームボタンでホームに戻ってください

準備 7. ALBLOをアンインストールする。

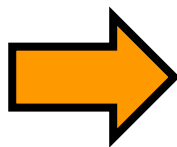

1. TANITAホームページからapkをダウンロードする。

TANITA

Alblo Ver.1.2.1.6 / Albloid Ver.1.1.0.6の場合



ALBLOはこちら↓



https://data.tanita.co.jp/apk/ALBLO_1216.apk



ALBLOIDはこちら↓



https://data.tanita.co.jp/apk/ALBLOID_1106.apk

ダウンロードは上のQRコードをスマホのカメラアプリで読み取るか、ダウンロードリンクから実行してください

1. TANITAホームページからapkをダウンロードする。

TANITA

Alblo Ver.1.2.1.4 / Albloid Ver.1.1.0.4の場合



ALBLOはこちら↓



https://data.tanita.co.jp/apk/ALBLO_1214.apk



ALBLOIDはこちら↓



https://data.tanita.co.jp/apk/ALBLOID_1104.apk

ダウンロードは上のQRコードをスマホのカメラアプリで読み取るか、ダウンロードリンクから実行してください

1. TANITAホームページからapkをダウンロードする。

TANITA

Alblo Ver.1.2.1.7 / Albloid Ver.1.1.0.7の場合



ALBLOはこちら↓



[https://api-
img.tanita.co.jp/files/user/support/manual/fc_series/
Alblo-release.apk](https://api-img.tanita.co.jp/files/user/support/manual/fc_series/Alblo-release.apk)



ALBLOIDはこちら↓



[https://api-
img.tanita.co.jp/files/user/support/manual/fc_series/
Albloid-release.apk](https://api-img.tanita.co.jp/files/user/support/manual/fc_series/Albloid-release.apk)

ダウンロードは上のQRコードをスマホのカメラアプリで読み取るか、ダウンロードリンクから実行してください

2. ダウンロードしたapkを通知から選択する。




『開く』をタッチする

ALBLO_1214.apk をダウンロードしました

開く

ここからは[Ver1.2.1.4](#)をインストールした場合の例を記載します、手順は何れも同一です
もしダウンロード通知が表示されない場合は上部の通知からご確認下さい


2. ダウンロードしたapkを通知から選択する。

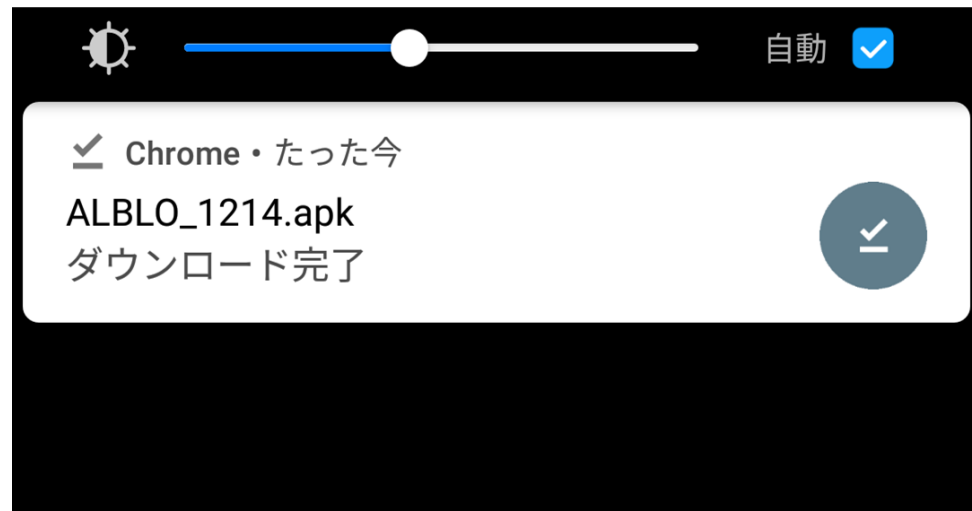

ホーム画面の上部を下方方向へスライドさせる

もしダウンロード通知が表示されない場合は上部の通知からご確認下さい




3. apkをインストールする。

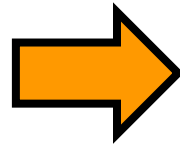


インストールをタッチ



4. アプリが旧バージョンか確認する。

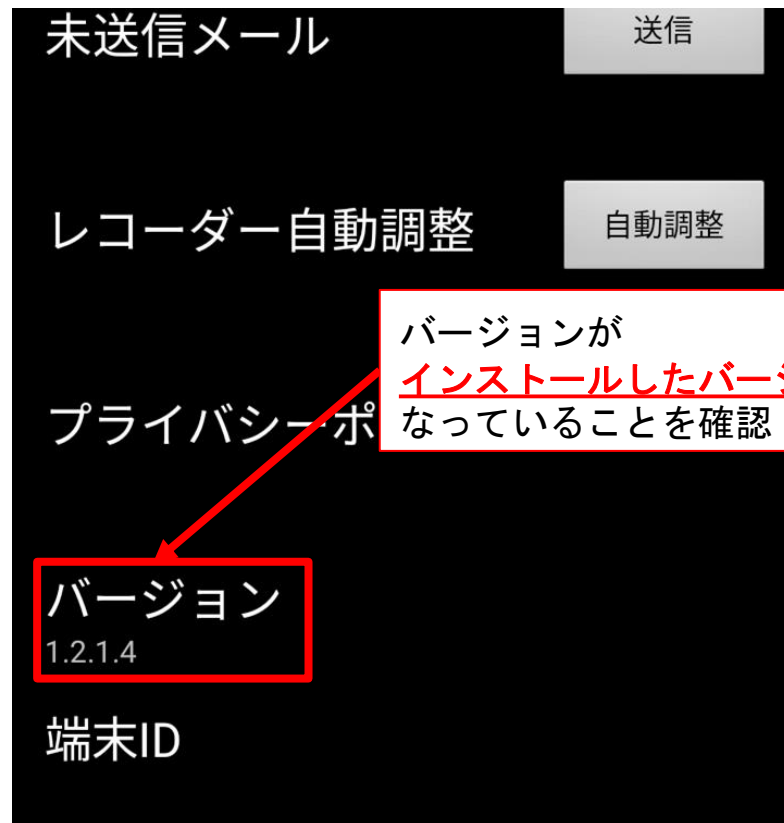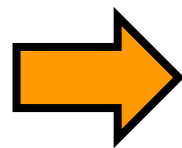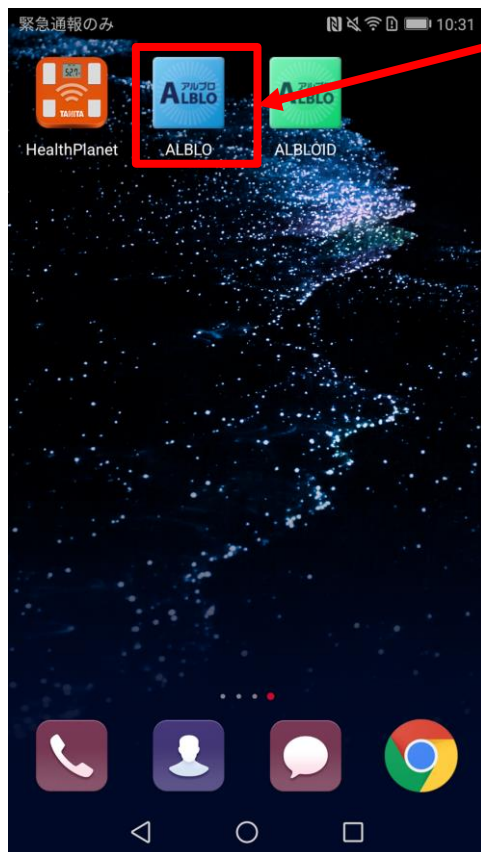

5. メモ内容を再入力して確認する。

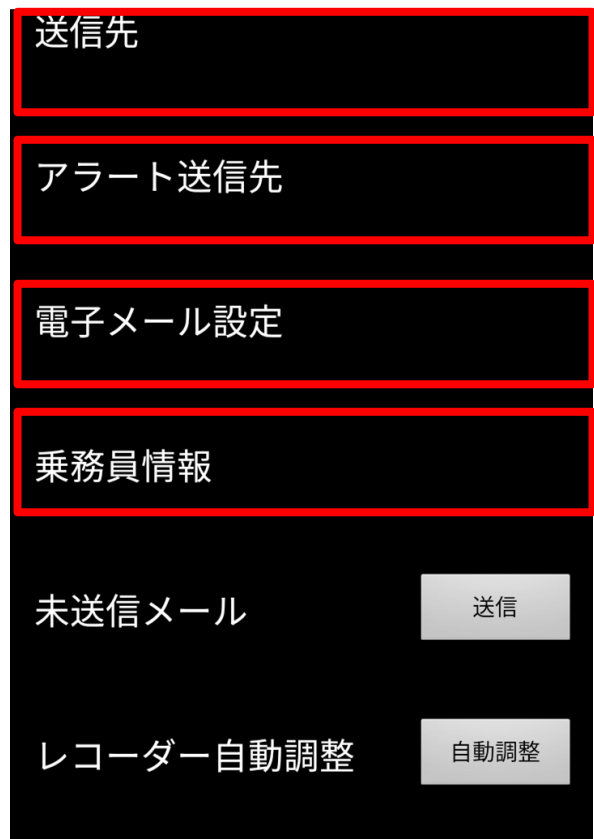

①送信先をタッチ後、p.6を参考にメモした項目を再入力する



②アラート送信先をタッチ後、p.8を参考にメモした項目を再入力する



③電子メール設定をタッチ後、p.10を参考にメモした項目を再入力する



④乗務員情報をタッチ後、p.12を参考にメモした項目を再入力する


1. ダウンロード通知が表示されない



ご利用のスマートフォンで『ダウンロード』と名前のついているアプリがある場合、そちらをタップしてください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

1. ダウンロード通知が表示されない

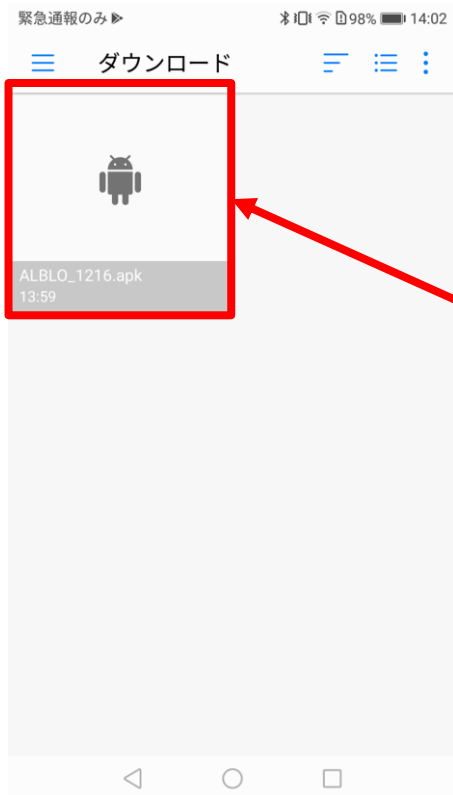


『ダウンロード』のアプリを起動すると、先にダウンロードしていたファイルが見つかります

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

2-1. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる

Android 7.X.X以前のバージョンをご利用の方

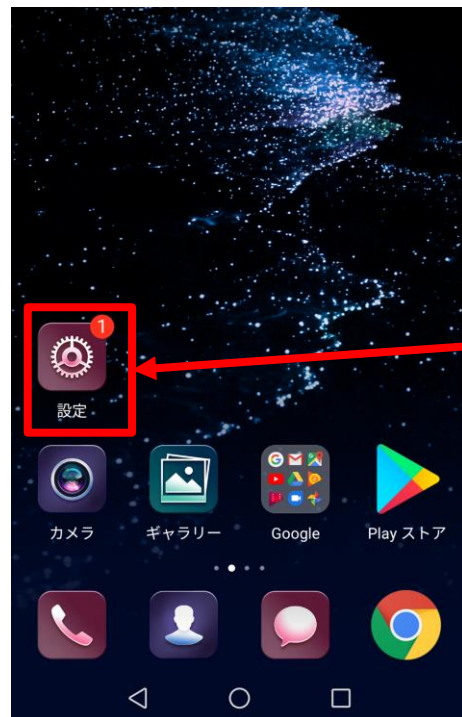


『設定』のアプリを起動して下さい

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

2-1. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる

Android 7.X.X以前のバージョンをご利用の方

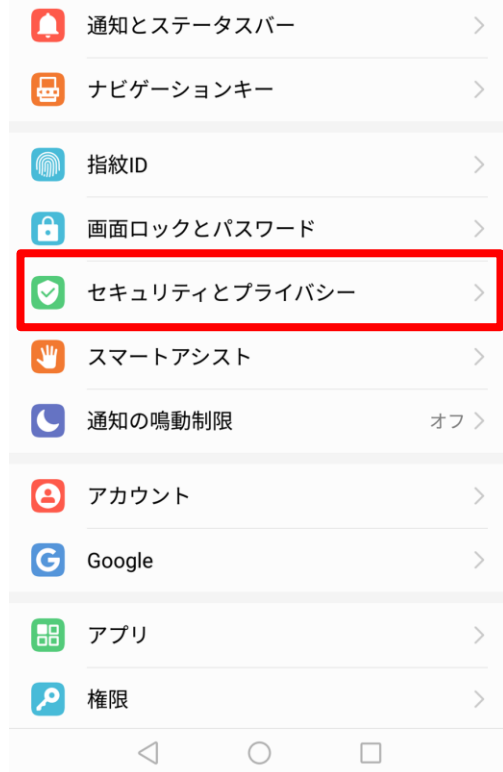

『セキュリティとプライバシー』もしくは”セキュリティ”という言葉の入った設定項目をタップしてください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

2-1. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる

Android 7.X.X以前のバージョンをご利用の方



『その他の設定』もしくは”詳細設定”という言葉の入った設定項目をタップしてください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

2-1. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる

Android 7.X.X以前のバージョンをご利用の方




『提供元不明のアプリのインストールを許可する』をオンにしてください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

2-2. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる

Android 8.X.X以降のバージョンをご利用の方

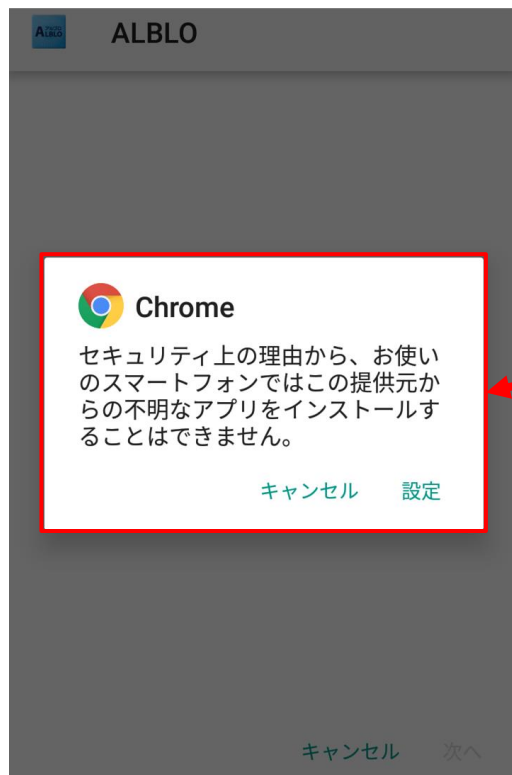

インストール時に図のようなダイアログが表示されます

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

2-2. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる

Android 8.X.X以降のバージョンをご利用の方




設定をタップします

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

2-2. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる

Android 8.X.X以降のバージョンをご利用の方

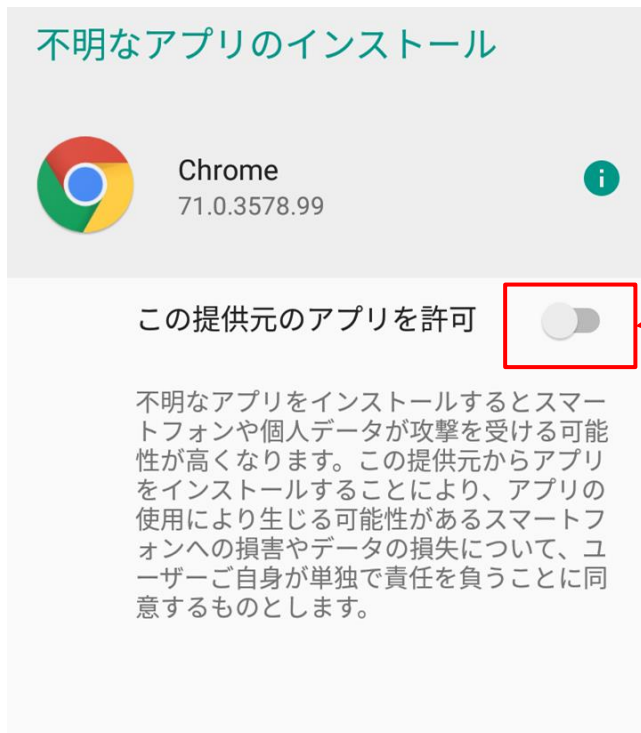

『この提供元のアプリを許可』
をオンにします

※写真は一例であり、機種によって異なる
場合がございます、ご承知おきください

2-2. 提供不明のアプリのインストールがブロックされる

Android 8.X.X以降のバージョンをご利用の方




インストールが可能になります

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

キャンセル インストール


3. 自動でアプリのアップデートがされてしまう

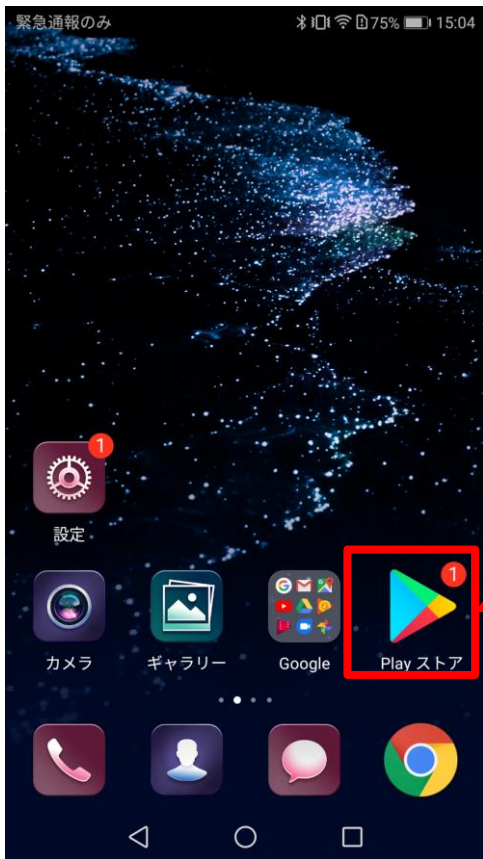

『Play ストア』のアプリを起動してください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

3. 自動でアプリのアップデートがされてしまう

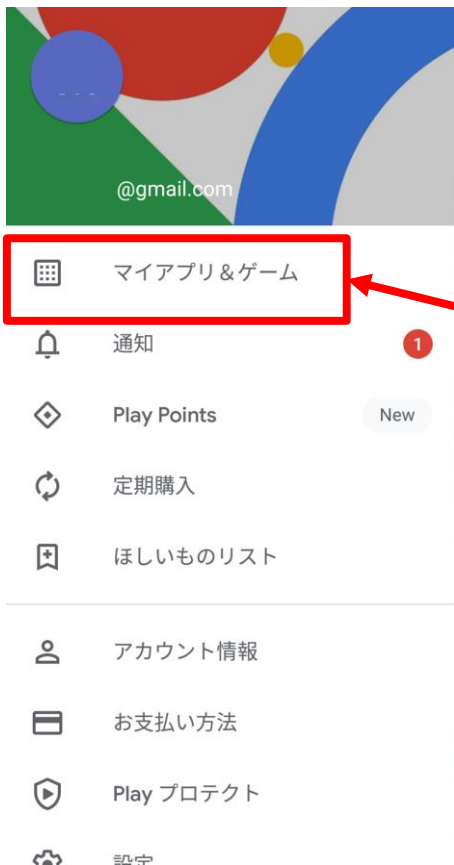


『マイアプリ&ゲーム』をタッチしてください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

3. 自動でアプリのアップデートがされてしまう

緊急通報のみ 75% 15:04

アップデート インストール済み ライブラリ

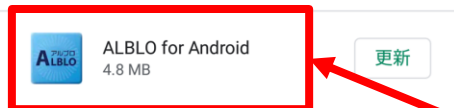

お使いの『ALBLO for Android』あるいは『ALBLOID for Android』をタッチしてください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください



3. 自動でアプリのアップデートがされてしまう



右上の『⋮』をタッチして、設定画面を開いてください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

3. 自動でアプリのアップデートがされてしまう



『自動更新の有効化』のチェックを外してください

※写真は一例であり、機種によって異なる場合がございます、ご承知おきください

4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**

Galaxy系列向けに修正したアプリをご利用ください

- 1.現時点での設定を確認し、メモなどに情報を残してください ⇒ 電子メール設定、送信先など
- 2.現状のアプリをアンインストールしてください
- 3.下記リンク「4.スマートフォン用アプリ「Android版ALBLO」ダウンロード」よりアプリを選択してインストールしてください

https://www.tanita.co.jp/p/support_alblo/

Alblo Ver.1.2.1.7 / Albloid Ver.1.1.0.7の場合



ALBLOはこちら↓




ALBLOIDはこちら↓



4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**

4. アプリをダウンロードしてください
※必要に応じてダウンロードの許可設定をお願い致します

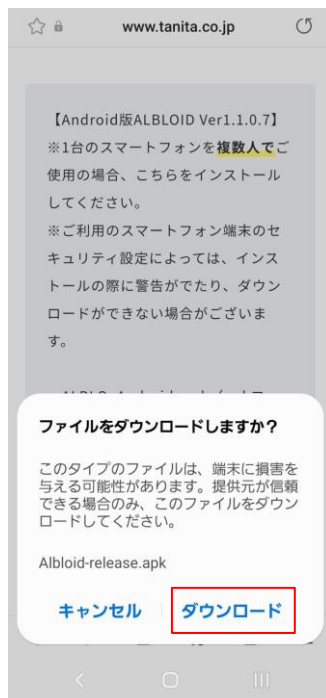


4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**

【参考】 AQUOS sense4の場合





① 『設定』 をタップ

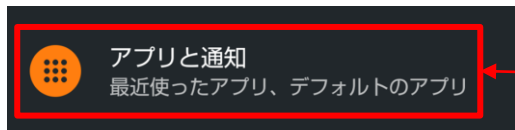

②一覧から『アプリと通知』をタップ


4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**

【参考】 AQUOS sense4の場合

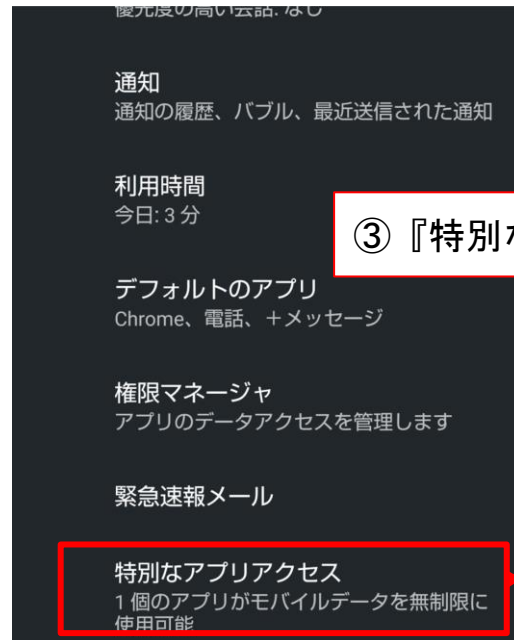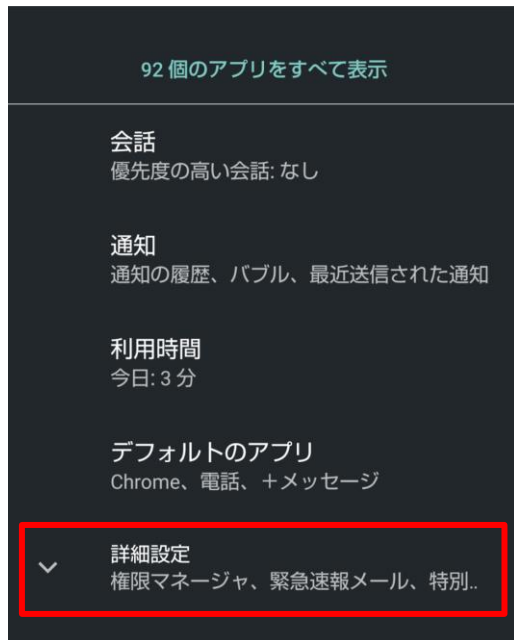

4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**

【参考】 AQUOS sense4の場合

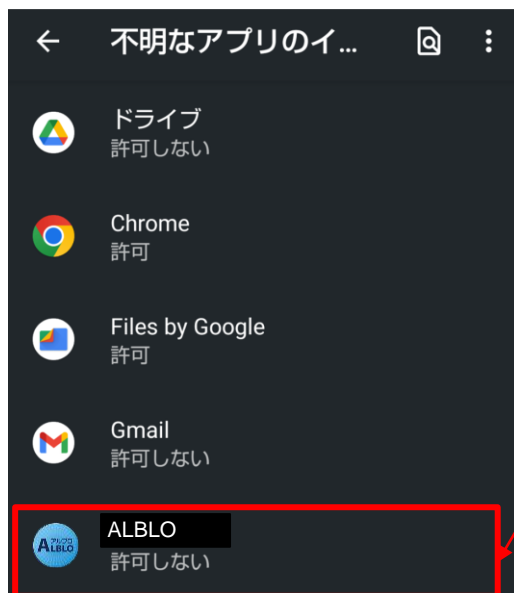

④インストールしたいアプリを選択

4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**

【参考】 AQUOS sense4の場合




⑤ 『この提供元のアプリを許可』 をON

4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**




4. ファイルをダウンロード後に『ファイルを表示』をタップ

4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**

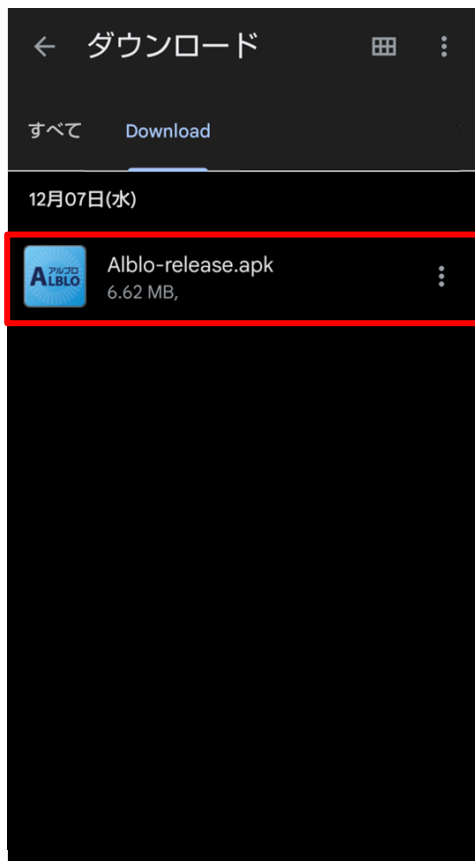

5. ダウンロードしたAlblo-release.apkを
タップしてインストールする

4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**

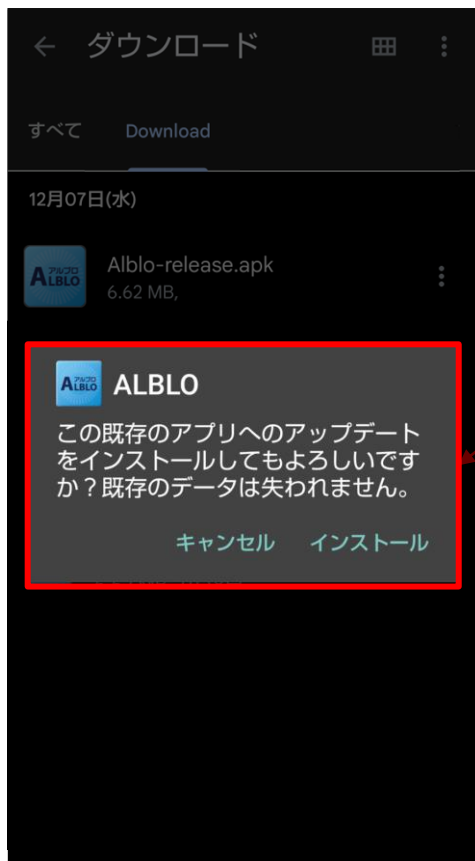

6. インストールをクリックしてアプリをアップデートする

4. Galaxy系のAndroid12端末でアプリが終了する **TANITA**



7. アプリが正常起動後、再度設定を入力しなおして完了