

TANITA®

健康をはかる

自動身長計付き体組成計

DC-250

型式承認取得品

図基準適合証印

身長・体重・体組成の
同時測定が可能

- 操作は簡単、スピード測定
入力の手間が省ける、入力項目固定機能付き
測定手順を音声ガイダンスでお知らせ
対話方式の入力も可能なタッチパネル入力方式を採用
- 体組成測定による健診付加価値のアップ
身長・体重・体組成を同時に測定
- 省スペースで設置
1台で身長計・体重計・体組成計の3役が可能
- 外部機器との連携も可能
外部信号入出力用USBポート、RS-232Cポート付きで、
健診システムとの連携が可能
※USBポート、RS-232Cポートの同時使用はできません。



※台は非売品です。

TANITA	
自動身長計付き体組成計	
DC-250	
14/08/01(金) 12:01	
氏名	
ID 0000000001	
入力項目	
体型モード	スタンダード
性別	男性
年齢	31才
身長	176.0 cm
体重	80.0 kg
着衣量 (PT)	1.0 kg
測定結果	
身長	176.6 cm
体重	68.9 kg
体脂肪率	18.0 %
体脂肪量	12.4 kg
筋肉量	56.5 kg
体水分率	53.6 %
基礎代謝	1587 kcal
推定体脂肪	2.9 kg
体年齢	24才
内臓脂肪レベル	7.5 点
脚点	1.0 点
BMI	22.1
標準体重	68.6 kg
体脂肪率	0.5 %
体脂肪率と筋肉量による体型判定	
13.0 ~ 23.9 %	
8.4 ~ 17.7 %	
判定	
◇体脂肪率	
やせ 標準 軽肥満 肥満	
◇BMI	
やせ 普通 肥満1 肥満2	
◇内臓脂肪レベル	
標準 やや過剰 過剰	
◇筋肉量グラフ	
少 平均 多	
◇基礎代謝レベル	
燃えにくい 標準 燃えやすい	
◇脚点	
低 やや低 良	
◇体脂肪率と筋肉量による体型判定	
細身筋肉質	
◇インピーダンス	
6.25kHz	50kHz
X	562.2
R	-32.7
Z	553.1
	482.2
	-50.4
	484.8

プリントアウト例

Made in Japan 日本製

身長・体重・体組成を同時に測定し、集団健診を強力にサポート

適切な減量や健康管理のためには体重や身長だけではなく体脂肪率や筋肉量などの体組成もチェックすることが大切です。タニタの自動身長計付き体組成計(DC-250)は、乗るだけで身長・体重と同時に様々な体組成もスピーディーにチェックできます。受診者の健康管理に役立つ情報の提供が可能となり、集団健診をより強力にサポートします。

- 身長、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、体水分量、基礎代謝量、BMI / ローレル指数などの表示・プリントアウトが可能
- 体重のみ、身長・体重のみでも、測定、プリントアウトが可能
- 測定結果の画面表示、プリントアウト内容は任意に選択可能
- 体重の証明用に使用可能
- 伸縮式自動身長計で、移動健診に最適
- 移動に便利なグリップとキャスター付き

名称		DC-250 自動身長計付き体組成計			
体重測定部	計量方式	電気抵抗線式はかり			
	ひょう量(最大計量)	200kg(着衣量含む)			
	目量(最小表示)	0.1kg			
	風袋引き量(着衣量)	0.0~10.0kg(0.1kg単位)			
	測定範囲	2.0~200.0kg(0.1kg単位)			
身長測定部	自動計測	100.0~200.0cm(手動入力90.0~249.9cm)			
	測定方式/判定基準	DXA法			
インピーダンス測定部	測定周波数	6.25kHz / 50kHz			
	測定電流	500μA			
	測定範囲	150 ~1200Ω(6.25kHz) / 150 ~1000Ω(50kHz)			
測定項目		仕様	身長 体組成計	身長 体重計	体重計
入力項目	ID	ID / シリアルID / なし	○	○	○
	体型	スタンダード / アスリート	○	—	—
	性別	男 / 女	○	—	—
	年齢	6~99才(成人モードあり)	○	—	—
	身長(手動入力時)	90.0~249.9cm	○	—	—
	腹囲	任意入力可能(20~200cm)	○	○	—
出力項目	体重	2.0~200.0kg(0.1kg単位)	○	○	○
	身長	0.1cm単位	○	○	—
	体脂肪率	3.0~75.0%(0.1%単位)・判定付	○	—	—
	脂肪量	0.1kg単位	○	—	—
	除脂肪量	0.1kg単位	○	—	—
	体水分量	0.1kg単位	○	—	—
	体水分率	0.1%単位	○	—	—
	基礎代謝量	0~9999kcal / 日(1kcal単位)・判定付	○	—	—
	BMI	体重(kg) / 身長(m) ² (0.1単位)・判定付 ※17才以下はローレル指数を表示	○	○	—
	標準体重	身長(m) ² ×22(0.1kg単位)	○	○	—
	肥満度	{(体重-標準体重) / 標準体重} × 100(0.1%単位)	○	○	—
	筋肉量	0.1kg単位・判定付	○	—	—
	推定骨量	0.1kg単位	○	—	—
	体内年齢	12~90才(1才単位)	○	—	—
	内臓脂肪レベル	1~59レベル(0.5レベル単位)・判定付	○	—	—
	脚点(脚部筋肉量点数)	50~150点(1点単位)・判定付	○	—	—
	体型判定	9段階	○	—	—
	インピーダンス	リアクタンス、レジスタンス、インピーダンス情報	○	—	—
	プリントアウト	枚数・印字項目選択可能	○	○	○
その他仕様					
外部インターフェース		RS-232Cポート(Dサブ9ピン)双方向 / USBポート			
表示部・入力方式		320×240ドット STNモノクロ液晶 タッチパネル			
電源		AC100V(50/60Hz)			
消費電力		35W以下			
使用温度		5~35℃			
主な付属品		電源コード、プリンター用紙1巻、結果解説ポスター			
製造国		日本			
価格		¥1,200,000(税抜)			

■ オプション 専用プリンター用紙4巻セット(1巻で約150人分) 2903 ¥3,000(税抜)

▲ 体組成計は測定に際して微弱な電気を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。

株式会社 **タニタ** インターネット ホームページ <http://www.tanita.co.jp>

*本 社	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	03(3968)2111(代表)	FAX03(3968)2661
*東 京 営 業 所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	03(3558)8111(代表)	FAX03(3558)0335
*大 阪 営 業 所	〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15	06(6784)2811(代表)	FAX06(6784)2778
*名古屋営業所	〒465-0072 愛知県名古屋市中区東区牧原2-707	052(704)2201(代表)	FAX052(704)2221
*福岡営業所	〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6	092(575)5761(代表)	FAX092(575)5617
*北日本営業所	〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8	022(299)7161(代表)	FAX022(299)7163


※(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66)2122(代表)
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) ☎0570-099655 受付時間 9:00~18:00(土日祝日を除く)

© 2016 TANITA Corporation.
※はISO9001の認証登録事業所
○表示価格をはじめ、このカタログの内容は2016年12月現在のものです。
○商品のデザイン・仕様・価格に変更になることもありますのでご了承ください。
○商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。


測定開始画面例




身長体重計モードプリントアウト例

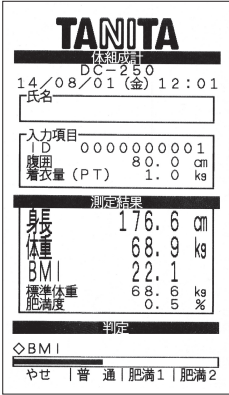

相関図<BIA法とDXA法で求めた体脂肪率の相関>

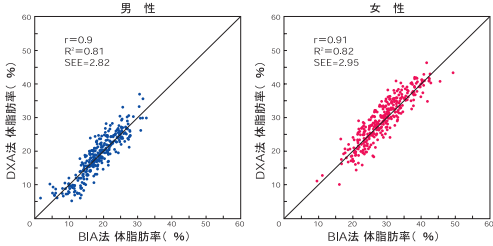

寸法図 単位: mm

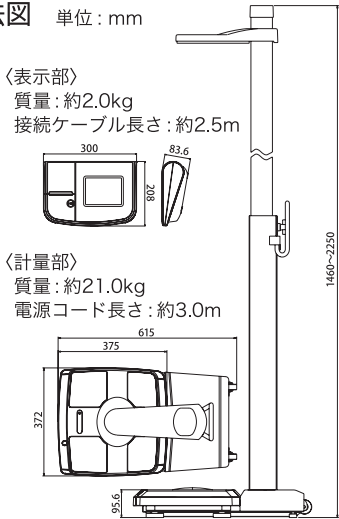

※寸法は概略です。