


自動身長計付きで、 スタッフの作業負担を軽減

- 測定スピードが速い(約5秒)。
- 移動や収納に便利な伸縮式自動身長計を採用。
- カラータッチパネル入力方式+ボイスガイド機能付き。
- 測定結果は内蔵プリンターから印刷可能。
- USBポート、RS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能。
*USBポートとRS-232Cポートは同時に使用できません。
- 健診施設に最適な保守点検付き長期保証パック対応商品。
- 体重の証明用に使用可能。
- SDメモリーカードにデータ保存。

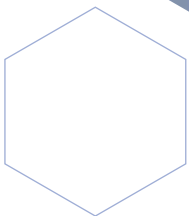

WB-530A

WB-530A 主な特長

自動だから身長測定が速くて簡単


- 多くの受診者様、患者様を測定する際に自動身長計なら、短時間・低負担で測定が可能です。
- 高身長の方を測る際もカーソルが自動だから測定が簡単です。

体重証明用と外部出力標準装備

- 健診や人間ドック、カルテへの記載が可能な検定付きです。
- USB、RS-232Cポートを標準装備。システム連携などに対応します。 *USB、RS-232Cポートの同時使用はできません。

感熱式プリンターを標準装備

- 全ての測定項目を約5秒でプリントアウトできます。
- プリントアウトする項目や枚数を選択できます。

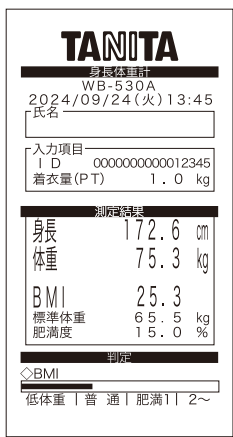


プリントアウト例

保守点検付き長期保証パック対応


- 通常保証後、5年間の長期保証に加入ができます。計5回の点検がセットになっています(価格はお問合せ下さい)。

保守点検パック概要図


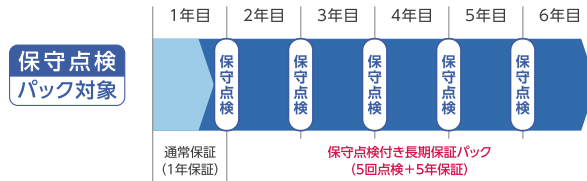


寸法図 (単位: mm)

〈表示部〉
質量: 約1.6kg
接続ケーブル長さ: 2.7m

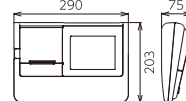

〈計量部〉
質量: 約27.5kg
電源コード長さ: 2.0m

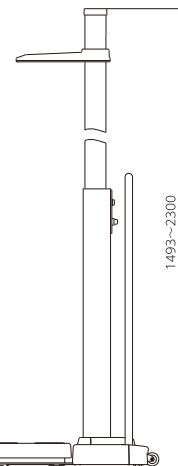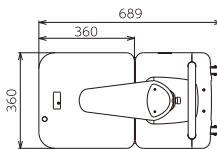

*寸法は概略です。

仕様

体重測定部	計量方式	電気抵抗線式はかり
	精度等級	3級
	ひょう量(最大計量)	200kg(着衣量含む)
	目量(最小表示)	0.1kg
表示部	カラーLCDタッチパネル	
外部インターフェイス	USB(TYPE-Bコネクタ)またはRS-232C双方向(Dサブ9ピンメスコネクタ)	
電源	入力AC100V(50kHz/60kHz)	
消費電力	35W	
使用条件(保管条件) 温度/湿度範囲	5~35℃(-10~60℃)/30~80%(10~90%)結露なきこと	
製造国	日本	
メーカー希望小売価格	¥750,000(税抜)	
主な付属品	専用プリンター用紙4巻、SDメモリーカード、2P変換プラグ	

測定モード別仕様

項目	身長体重モード	体重計モード	
入力項目	着衣量(風袋引き量)	0.0~10.0kg(0.1kg単位)	○
	ID	0~9999999999999999(16桁)	○
出力項目	身長	100.0~200.0cm	—
	体重	0.1kg単位	○
	BMI	0.1単位(判定付き)	—
	標準体重	0.1kg単位	—
	肥満度	0.1%単位	—

*SDIはSDアソシエーションの商標です。

※身長のみ測定はできません。

株式会社 タニタ

本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221
福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区妻野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区福岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66)2122(代表)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) ☎ 0570-099655 受付時間9:00~17:00(祝日を除く月~金)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2024年8月現在のものです。
◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

<https://www.tanita.co.jp/>

©2024 TANITA Corporation.

オプション品



専用プリンター用紙4巻セット

品番	2903
メーカー希望小売価格	¥3,000(税抜)

本体に1巻(約500人分)が付属されています。



表示ボックススタンド

品番	OP-005
メーカー希望小売価格	¥38,000(税抜)

机など表示部を置く場所がない場合に便利です。



昇降補助手すり

品番	OP-502
メーカー希望小売価格	¥45,000(税抜)

寸法(質量) 約幅653×高さ900×奥行700mm(約12kg)



収納バッグ

品番	OP-089
メーカー希望小売価格	¥4,000(税抜)

表示部を収納することができます。