

(報道資料)

**ママが“孤育て”せずに、家族で育児と赤ちゃんの成長を分かち合うために
授乳量と体重をスマートフォンアプリで記録・確認・共有できる
ベビースケール「nometa (のめた)」BB-115L を11月15日に発売**

2024年11月14日

株式会社タニタ



**授乳量を1グラム単位で表示し、スマートフォンアプリで管理できる
授乳量機能付ベビースケール「nometa (のめた)」BB-115L**

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、社長・谷田千里）は、1グラム単位で赤ちゃんの授乳量を表示し、スマートフォンアプリで管理できる授乳量機能付ベビースケール「nometa (のめた)」BB-115Lを11月15日に発売します。「授乳量」と「体重」のデータをBluetooth®※1通信でスマートフォンに送信し、手間をかけずに授乳量や授乳回数、時間を記録・確認できます。赤ちゃんの授乳リズムや飲み方の傾向、成長の状況を簡単に把握できるようにしました。育児記録アプリ「ぴよログ」（運営：株式会社ぴよログ、愛知県半田市、社長・榊原洋平）と連携し、記録内容はアプリを通じてパートナーと共有できるため、家族での「チーム育児」（子育てを一人で抱え込まず、夫婦を中心にチームで行うこと）に役立ちます。価格はオープン。インターネット通販を中心に、年間5000台の販売を計画しています。

母乳は赤ちゃんにとって消化吸収が良く、感染症の発症や重症度を低下させる効果があることから、母乳育児にはさまざまなメリットがあります。厚生労働省の「平成27年度乳幼児栄養調査」によると、妊婦の9割以上が母乳育児を望んでいる一方で、出産後約8割の母親らが「授乳について困ったことがある」と回答しており、赤ちゃんを育てる母親の悩みの一つになっています。授乳で困ったことがあると答えた母親のうち、4割以上が「母乳が足りているのか分からない」、2割以上が「母乳が不足気味」ということを具体的な理由として挙げています。こうした母親らの困りごとに応えるため、タニタでは2016年に授乳量機

能付ベビースケール「nometa」BB-105 を発売しました。最大 20 キログラムまでの体重計量に対応するとともに、家庭用では国内初となる 1 グラム単位で授乳量を表示できる商品※2 で、発売以来、年間約 1 万台以上を販売。2023 年の合計特殊出生率が 1.20 と過去最低※3 を記録するなど少子化が進行する中で、多くの赤ちゃんの育児に利用されてきました。

今回発売する本商品は、授乳量と体重のデータを Bluetooth 通信でスマートフォンに送信し、アプリで記録・確認できることが特徴です。計測・表示項目は既存モデル「nometa」BB-105 と同じく、赤ちゃんの成長と授乳量の確認に必要な「体重」と「授乳量」の 2 項目。利用者アンケートで寄せられた「アプリと連携してほしい」「記録できるデータの量を増やしてほしい」といった、計測データをより簡単に記録し、活用したいというニーズに応え、アプリとの連携機能を付加しました。

使い勝手においては、既存モデルの操作性の高さを引き継ぎ、1 日に 10 回を超えることもある新生児期の頻回授乳時においても煩わしさを感じさせない仕様にしました。授乳量や体重のデータは一旦機器本体に保存され、連携したスマートフォンアプリを操作することでまとめて取得します。機器本体で 5 日分のデータを保存できるため、計測の度にスマートフォンを操作する必要はありません。授乳の量や回数、時間を最小限の操作で手間なく記録でき、個人差がある赤ちゃんの授乳の傾向やリズムなどを簡単に把握できます。また、多胎児家庭や第二子以降の育児でも利用できるよう、5 人まで登録して利用できるようにしました。この他、データの記録や管理以外で要望が高かったバックライトも搭載し、夜間授乳の際も確認しやすくしました。

連携する育児記録アプリ「びよログ」は、2017 年のリリース以来、累計 400 万以上ダウンロードされており、授乳やオムツ替え、身長・体重など赤ちゃんの育児に関するさまざまな項目を記録できます。「共有できる育児管理アプリ」であることも特徴で、パートナーなどとデータを共有できる機能を備えています。本商品で記録した授乳量や体重をアプリを通じて共有することで、仕事や外出などで赤ちゃんと離れている間の授乳状況をリアルタイムで知ることができます。母親に偏りがちな授乳に関する負担や不安を家族で共有し、出産後に母親が感じる孤立感を和らげ、家族がチームとなって取り組む子育てをサポートします。

タニタでは 1974 年にベビースケールを発売して以来、約 50 年にわたり医療現場から家庭用まで赤ちゃんの成長にまつわる幅広いニーズに応じてきました。今回、授乳量を記録できる機能を搭載した本商品の発売により、家族が一体となって取り組む「チーム育児」に貢献できると考えています。今後も商品やサービスのラインアップを拡充し、生涯にわたる健康づくりをサポートしていきます。

※1 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

※2 2016年発売当時。タニタ調べ。

※3 厚生労働省「令和5年（2023）人口動態統計」（確定数）。

【商品概要】

授乳量機能付ベビースケール「nometa」BB-115L

体 重：計量範囲 0～20 kg、最小表示 5g（0～8 kg）、10g（8kg 以上）


授乳量（計算値）：表示範囲 最小 1g 単位 -9999g～15 kg

過去メモリー（本体）：前回体重、前回授乳量（最大 5 人分）

電源：6V DC 単 3 形アルカリ乾電池（LR6）×4 本

サイズ：幅約 580 mm×高さ約 93 mm×奥行約 390 mm、質量約 2.2 kg（乾電池含む）

付属品：ベビーバスケット用マット（素材：EVA）、お試し用電池

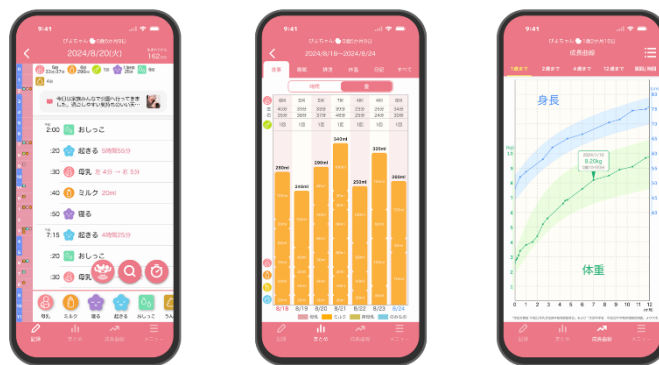

「びよログ」の表示画面

「育児管理画面」で育児の各項目とともに授乳した時間や量を表示（左）、
授乳量を日ごとに一週間表示したグラフ（中央）、成長曲線



授乳量機能付ベビースケール「nometa（のめた）」BB-115L



授乳量機能付ベビースケール「nometa（のめた）」BB-115L ではかる様子

お客様からのお問い合わせ先

株式会社タニタ お客様サービス相談室

ナビダイヤル：0570-099655

受付時間：平日 9:00-17:00

※本資料に記載されている情報は発表日現在のものです。このため、時間の経過あるいは後発的なさまざまな事象によって、内容が予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。