

TANITA

Healthy Habits for Happiness

業務用体重計

WB-260A

型式承認取得品

図基準適合証印

小型 軽量 取っ手付

持ち運びや収納に便利な検定付き体重計

移動健診や病棟、クリニックでの測定に最適です。



Made in Japan 日本製

1 小型・軽量・取っ手付きで
持ち運びに便利。
使用場所も選びません。

本体サイズは
約幅300×奥行310mm

2 薄型なので
足上げの負担も少なく、
収納場所も選びません。

約55mmの
薄型設計

3 健診時に便利な
表示方向切替可能。



標準表示
(個人測定時)

対面表示
(健診時)

4 バックライト付きなので、暗い場所でも測定可能。
単3形乾電池使用時もバックライト表示できます。



5 測定時間が短縮されました。
(当社の業務用体重計の中で最短です)

8 200kgまで測定可能。

6 オートパワーオフの時間設定可能。
(1分/5分/10分/30分/60分/連続から選択)

9 ACアダプターと単3形乾電池の両電源に対応可能なので
使用場所で使いわけができます。
(単3形アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な
省エネ設計です。*バックライト使用時は約5000回)

7 プリセット風袋機能付きで
着衣量も簡単に設定可能。

10 体重の証明用に使用できます。


仕様

商品名	業務用体重計
品番	WB-260A
計量方式	電気抵抗線式
型式承認取得品	精度等級4級(使用地域の指定は不要です)
ひょう量(最大計量)	200kg
目量(最小表示)	100g(0~100kgまで) / 200g(100~200kgまで)
最大風袋引き量	10kg(プリセット風袋引き)
表示方法	4桁LCD バックライト点灯(アンバー色) 文字高28mm
外部インターフェイス	RS-232C D-sub9ピン メス 出力専用 (WB-260A(RS付)仕様のみ)
質量	約4.0kg
電源	ACアダプター(DC6V 500mA) または単3形アルカリ乾電池4本(別売)
主な付属品	ACアダプター
製造国	日本
メーカー希望小売価格	WB-260A / ¥39,000(税抜) WB-260A(RS付)* / ¥42,000(税抜)

* (RS付)は、RS-232Cポート(出力専用)が付いています。

寸法図 (単位:mm)

質量: 約4.0kg
ACアダプターケーブルの長さ: 約1.8m

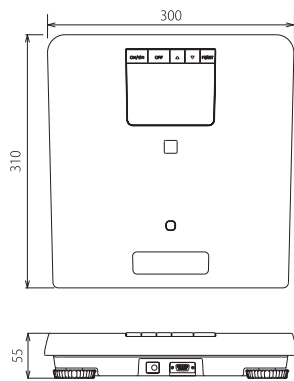


*寸法は概略です。

オプション

キャリングケース ¥22,000(税抜)



クローズ時

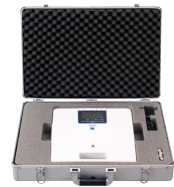

オープン時

*中の商品は含まれません。

感熱式プリンターセット OP-201 ¥93,000(税抜)

(ACアダプター、RSケーブル、プリンター用紙4巻込み)
*WB-260A(RS付)のみ対応。



プリントアウト例

体重	52.75 kg
着衣量 (PT)	1.00 kg

株式会社 **タニタ**

本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市中区東区牧の原2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221
福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66)2122(代表)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) ☎0570-099655 受付時間9:00~17:00(祝日を除く月~金)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2026年10月現在のものです。

<https://www.tanita.co.jp/>

◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることありますのでご了承ください。

◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

©2026 TANITA Corporation